

**Información del producto**

**Información de pedidos**

**Con conexión DISS tuerca apretada de manos & pezón**

Modelo	Descripción
57-0104	0-15 lpm Flujómetro Oxígeno NFPA
57-0604	0-15 lpm Flujómetro Aire Médico NFPA
57-0104-1	0-15 lpm Flujómetro Oxígeno ISO
57-0604-1	0-15 lpm Flujómetro Aire Médico ISO

**Con conexión al estilo Ohmeda™ (Ohio)**

Modelo	Descripción
57-0107	0-15 lpm Flujómetro Oxígeno NFPA
57-0607	0-15 lpm Flujómetro Aire Médico NFPA
57-0107-1	0-15 lpm Flujómetro Oxígeno ISO
57-0607-1	0-15 lpm Flujómetro Aire Médico ISO

**Con conexión al estilo Puritan™**

Modelo	Descripción
57-0108	0-15 lpm Flujómetro Oxígeno NFPA
57-0608	0-15 lpm Flujómetro Aire Médico NFPA
57-0108-1	0-15 lpm Flujómetro Oxígeno ISO
57-0608-1	0-15 lpm Flujómetro Aire Médico ISO

**Con conexión al estilo Chemetron™ (Allied)**

Modelo	Descripción
57-0109	0-15 lpm Flujómetro Oxígeno NFPA
57-0609	0-15 lpm Flujómetro Aire Médico NFPA
57-0109-1	0-15 lpm Flujómetro Oxígeno ISO
57-0609-1	0-15 lpm Flujómetro Aire Médico ISO




Flujómetro Oxígeno      Flujómetro Aire Médico  
Número de pieza 57-0107      Número de pieza 57-0604

**La Característica**

Los flujómetros de Tri-Tech están diseñados para dependabilidad y durabilidad. Cada flujómetro incorpora una asamblea de la válvula de la aguja con cuidado tramada para asegurar la exactitud del flujo superior, un cuerpo de cobre duable y un alojamiento del policarbonato. La variedad de 15 LPM con 1-5 LPM amplió la escala. Los Flujómetros de Tri-Tech son exactamente calibrados para Oxígeno y Aire Médico, y son ofrecidos con una variedad de conexiones se la entrada.

**Especificación**

- Presión de entrada de 50 psi
- Precisión de flujo ±0.5 litro o ± 10% de lectura (lo que sea es mayor)
- Conexión de salida de 9/16"-18 RH DISS 1240
- Inundación/descarga mínima 50 LPM
- **Garantía de cinco (5) año**

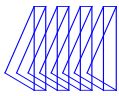


**Información del producto**



- Además del estándar 0-15 lpm, oxígeno disponible en caudales de 0-1 lpm, 0-3.5 lpm, 0-8 lpm y 0-70 lpm
- Además del estándar de 0-15 lpm, Medical Air disponible en caudales 0-25 lpm y 0-70 lpm
- Etiquetado específico de tubo interior, perilla y gas codificado por colores
- Incluye filtro de entrada y extensión de entrada
- Contrapresión compensada para que se mantenga la precisión del flujo
- Calibrado a 50 psi (414 kPa)

**Cómo hacer un pedido**

Además de los flujómetros estándar de 0-15 lpm que se muestran en la página 1, utilice esta guía de numeración de piezas para el flujómetro que se adapte a sus necesidades

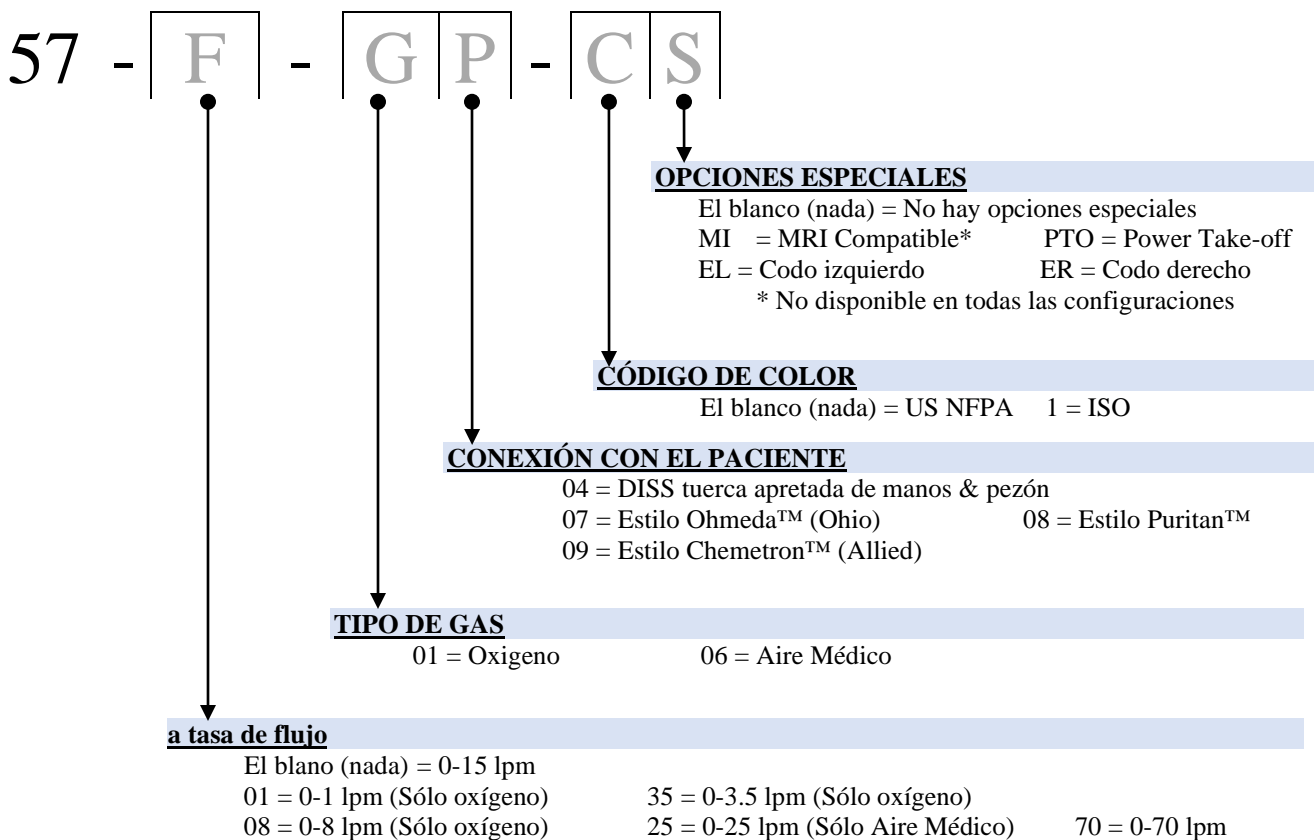

**Examples:**

- 57-0107 - Flujómetro Oxígeno 0-15 lpm con conexión al estilo Ohmeda™ (Ohio)
- 57-70-0104 - Flujómetro Oxígeno 0-70 lpm con conexión DISS tuerca apretada de manos & pezón
- 57-25-0609-1PTO - Flujómetro Aire Médico 0-25 lpm con conexión al estilo Chemetron™ (Allied), Código de color ISO con Power Take-Off